

System One REMstar Pro e REMstar Auto




Guia de bolso



Este guia de bolso não substitui o manual completo. Pode consultar informações adicionais importantes nos manuais dos respectivos dispositivos.

Controlos

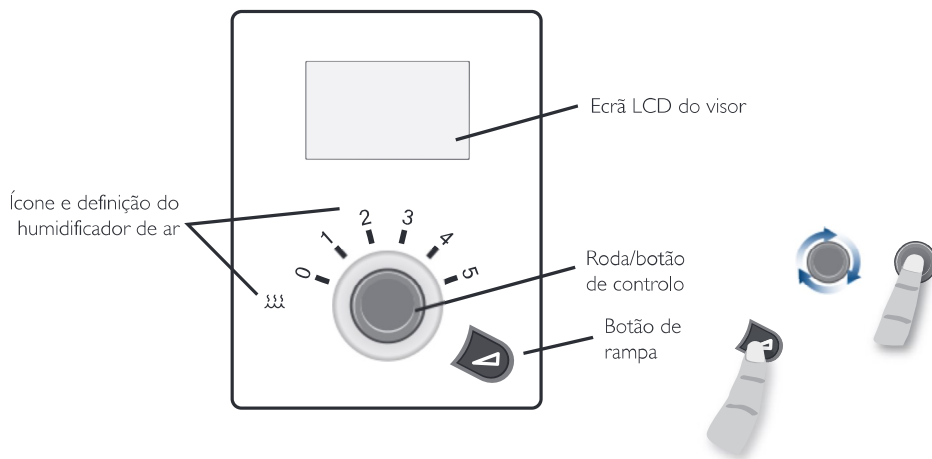

Menu do paciente

| | |
|-------------|--------------|
| Terapêutica | FLex |
| Informação | Configuração |

Terapêutica



Inicia a terapêutica ao premir a roda de controlo. Posição básica do menu.

Nota: Se o paciente rodar inadvertidamente o botão de menu, o System One volta automaticamente ao menu do paciente Terapêutica após 10 seg. sem actividade. O paciente pode iniciar a terapêutica da forma habitual premindo a roda de controlo.

~~R_x~~ Ecrã apresentado para “Cartão SD inserido, prescrição aceite”.

~~R_x~~ Ecrã apresentado para “Cartão SD inserido, prescrição rejeitada”.

Ecrã apresentado para “Cartão SD inserido incorrectamente”.

Ecrã apresentado para “Cartão SD cheio”.

Ecrã apresentado para “Cartão SD removido”.

Menu do paciente

| | |
|-------------|--------------|
| Terapêutica | Flex |
| Informação | Configuração |

Flex



Definições para os modos Flex e Flex-Demo.

| | |
|-------------|--------------|
| Terapêutica | Flex |
| Informação | Configuração |

Informação

Consulta das horas de terapêutica e do historial de parâmetros da terapêutica importantes (se divulgado pelo supervisor clínico do paciente).

| | |
|-------------|--------------|
| Terapêutica | FLex |
| Informação | Configuração |

Configuração



Definições terapêuticas adicionais divulgadas para o paciente.

| | |
|-------------|--------------|
| Terapêutica | FLex |
| Informação | Configuração |

Consulta das horas de terapêutica

O paciente pode ler as horas de terapêutica no dispositivo da seguinte forma:

No menu do Paciente, seleccione Informação.



| | |
|------------|----------------------|
| Informação | Voltar |
| | Estado |
| | Telefone ligado |
| | Horas da terapêutica |

No menu Informação, seleccione o item do menu Telefone ligado.



| | |
|----------|----------------------|
| Consulta | Voltar |
| | Horas da terapêutica |
| | Insuflador... 0.0 |
| | Dias > 4 |

No menu Telefone ligado, são apresentadas as horas de terapêutica em Therapy hours.



Teste da máscara

Apenas para o System One REMstar Auto no modo Auto CPAP.

O teste da máscara permite ao paciente verificar o ajuste correcto da máscara antes de iniciar a terapêutica. [Esta função tem de ter sido autorizada pelo supervisor clínico para o paciente.](#)

Se premir o botão de rampa (ver o painel de controlo) enquanto o dispositivo ainda não está a produzir qualquer pressão terapêutica, o teste da máscara é iniciado. O dispositivo produz uma pressão de teste durante 40 segundos. No final do teste, uma marca de verificação no visor indica o ajuste correcto da máscara. Uma cruz indica que o ajuste da máscara ainda pode ser melhorado.



Ajuste correcto da máscara



O ajuste da máscara pode ser melhorado

Configuração – Definições

Depois de seleccionar Configuração no menu clínico, tem ao seu dispor as seguintes opções de configuração:

| | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------------------|------|--------------|
| Modo | C-Check* | CPAP | REMstar Pro | | |
| | Auto Trial* | C-Check* | CPAP | Auto | REMstar Auto |
| Pressão CPAP | 4,0 - 20,0 | | 4-20 cm H ₂ O | | |
| Pressão C-Check* | | | | | |

Apenas para REMstar Auto

| | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| Se Auto Trial* estiver seleccionado | 3,0 - 30,0 | |
| Mínimo de dias | | |
| Máximo automático | 4,0 - 20,0 | Pressão terapêutica máxima (até 20 cm H ₂ O) |
| Mínimo automático | 4,0 - 20,0 | Pressão terapêutica mínima |

*Opcional

| | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|----------|---|
| | Não Flex | C-Flex | C-Flex + | REMstar Pro |
| Tipo de Flex | Não Flex | C-Flex | A-Flex | C-Flex + |
| Flex | 1 | 2 | 3 | Fase de Flex configurável |
| Bloqueio de Flex | LIGADO | DESLIGADO | | “Ligado” bloqueia a definição da fase de Flex no menu Configuração do paciente. |
| Bloqueio do tipo de tubo | LIGADO | DESLIGADO | | “Ligado” bloqueia a definição do tipo de tubo no menu Configuração do paciente. |
| Tipo de tubo | 15 | 22 | | Define o tipo de tubo utilizado: 15 mm ou 22 mm (predefinição). A resistência do respectivo tubo é compensada pelo dispositivo. |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Controlo de resistência do System One | 0 X1 X2 X3 X4 X5 | Definição para compensar a resistência da máscara com máscaras especiais. 0 para máscaras padrão. |
| Bloqueio do System One | LIGADO DESLIGADO | “Ligado” bloqueia o controlo de resistência no menu Configuração do paciente. |
| Tempo de rampa | 0:00 - 0:45 | Duração da rampa de sono de 0 (desligado) a 45 minutos. Não é apresentado se a CPAP estiver definida para apenas 4 cm H ₂ O. |
| Início da rampa | 4,0 - (auto mín/pres CPAP) | Pressão a que a rampa de sono é iniciada. Não é apresentado se a duração da rampa for 0. |
| Modo silencioso | LIGADO DESLIGADO | Modo silencioso por defeito. Durante o início e paragem da terapêutica, o dispositivo não emitirá um alarme (sinal sonoro). |

Apenas quando o humidificador está ligado

| | | |
|---|---|---|
| Humidificação do System One | LIGADO DESLIGADO | “Ligado” para o controlo automático do desempenho do humidificador através da humidade do ar e temperatura ambiente. “Desligado” para um desempenho de aquecimento constante. |
| Humidificador | 0 1 2 3 4 5 | Selecciona a definição do humidificador no início da terapêutica. Fases C1 a C5 (modo clássico) para um desempenho de aquecimento constante. |
| Se o tubo aquecido estiver ligado Humidificação do tubo aquecido | LIGADO DESLIGADO | “Ligado” para o controlo automático do desempenho do humidificador através da humidade do ar e temperatura ambiente num ambiente frio. |
| Nível de humidade | 1 2 3 | Selecciona a definição do humidificador no início da terapêutica. |
| Temperatura do tubo | 0 1 2 3 4 5 | Selecciona a definição do tubo aquecido no início da terapêutica. |

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|--|
| Ligar automaticamente | LIGADO | DESLIGADO | O dispositivo de terapia liga-se automaticamente ao respirar no mesmo. |
| Desligar automaticamente | LIGADO | DESLIGADO | O dispositivo de terapia desliga-se automaticamente após um determinado período se a máscara for retirada. |
| Alerta de máscara | LIGADO | DESLIGADO | Em caso de fuga significativa, o alerta de máscara é apresentado no visor e é emitido um sinal de alerta sonoro. |

Apenas com REMstar Auto

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|--|
| Opti-Start | LIGADO | DESLIGADO | “Ligado” permite ao paciente começar com uma pressão inicial mais adequada, reduzindo a probabilidade de eventos residuais ao início da noite. A definição Opti-Start é calculada a cada 30 horas como parte da pressão a 90%. |
| Verificação do ajuste da máscara | LIGADO | DESLIGADO | “Ligado” permite ao paciente verificar o ajuste da máscara antes da terapêutica ao medir a fuga. |
| Retroiluminação da rampa | LIGADO | DESLIGADO | “Ligado”: O botão de rampa e as fases do humidificador são ligeiramente iluminados durante a terapêutica. |
| Mostrar IAH/fuga/PB | LIGADO | DESLIGADO | “Ligado” permite ao paciente consultar os valores de IAH/Fuga/PB no menu Informação. |

Apenas com REMstar Auto

Noite dividida

LIGADO DESLIGADO

“Ligado” activa o modo de noite dividida: a terapêutica CPAP é administrada durante a primeira metade da noite, enquanto a terapêutica Auto CPAP é administrada durante a segunda metade da noite.

Início da noite dividida

4,0 - 20,0
120 180 240
Não Flex C-Flex C-Flex+
1 2 3
0:00 - 0:45
Pressão CPAP 4,00

Pressão da terapêutica CPAP durante a Noite dividida (entre o Mínimo automático e o Máximo automático). Duração da terapêutica CPAP até à alteração para Auto CPAP: 120, 180 ou 240 minutos. Tipo de Flex, definição de Flex, tempo de rampa e início de rampa.

Idioma

EN DE FR ES IT BR
DK FI NO SW 0

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, português do Brasil, dinamarquês, finlandês, norueguês, sueco. 0 para ícones.

Voltar

Voltar

Volta ao menu principal para utilizadores clínicos.

Menu clínico

| | |
|-------------|--------------|
| Terapêutica | Flex |
| Informação | Configuração |

Configurar os parâmetros da terapêutica

Mude para o menu clínico para configurar os parâmetros da terapêutica:

No menu do paciente, seleccione o item Configuração (fundo escuro).

Em seguida, mantenha premido o botão e o botão de rampa em simultâneo durante 5 segundos e aguarde até se ouvir o sinal sonoro duplo.



| | |
|------------|--------------|
| Sair | Lembrete |
| Informação | Configuração |

Estas definições podem ser seleccionadas no menu clínico.

Notas

**A Philips Healthcare é parte da
Royal Philips**

Para falar conosco

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Ásia
+49 7031 463 2254

Europa, Médio Oriente, África
+49 7031 463 2254

América Latina
+55 11 2125 0744

América do Norte
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 EUA

Apoio ao Cliente
+1 724 387 4000

Philips Respironics Ásia e Pacífico
+65 6882 5282

Philips Respironics Austrália
+61 (2) 9947 0440

Philips Respironics China
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Alemanha
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics França
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Iberia
+34 91 566 90 00

Philips Respironics Itália
+39 039 203 1

Philips Respironics Suécia
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Suíça
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Reino Unido
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics



© 2013 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de efectuar alterações nas especificações e/ou de descontinuar qualquer produto a qualquer momento sem aviso prévio ou obrigação e não será responsável por quaisquer consequências resultantes da utilização desta publicação.

Nota: Estas instruções resumidas não substituem o manual completo do fornecedor e utilizador incluídos com o dispositivo.

Broudy AE 9/24/13 MCI 4105680 PN 1110679